



AIRWAVE CUIDADO DE LA SALUD

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS QUIRÚRGICO N95

MÁS AIRE. MÁS USO.

Respiración más fácil y agradable confort es lo que obtienes al usar un respirador Airwave. La superficie de filtrado con diseño de ondas patentado permite un mayor flujo de aire hacia adentro y hacia afuera del respirador ¡Sin la necesidad de una válvula! Respiración fácil por diseño.

PROTECCIÓN N95 AUTORIZADA POR LA FDA Y APROBADA POR NIOSH.

Aprobado por la FDA como dispositivo médico de Clase 2 y aprobado por NIOSH con una eficacia del 95 % contra partículas sólidas y líquidas, sin incluir las partículas a base de aceite.

MAYOR COMFORT. MAYOR USO.

El exclusivo diseño FlexFit® se mueve con tu rostro para brindar comodidad durante todo el día. Más comodidad significa más cumplimiento.

SMARTSTRAP® COLGABLE & AJUSTABLE.

La innovadora SmartStrap de tela fresca se puede ajustar para un ajuste personalizado y permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello cuando no se usa, lo que ayuda a prevenir la pérdida prematura o el desecho de respiradores.

MALLA DURA-MESH® DURA MÁS.

La exclusiva malla Dura-Mesh protege el medio filtrante para que luzca más limpio por más tiempo. Además, resiste el colapso en ambientes cálidos y húmedos, por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo, lo que resulta en menos uso de respiradores y costos más bajos.

COMPLETAMENTE LIBRE DE METAL

El puente nasal contorneado elimina la necesidad de una banda nasal de metal, para una comodidad sin pellizcos. Además, SmartStrap se sujeta sin grapas.

CARACTERÍSTICAS


- Protección, comodidad y conveniencia para médicos, enfermeras, profesionales dentales, socorristas y otros en la industria de la salud
- Protege tanto al paciente como al personal sanitario de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.
- Certificado por NIOSH como un respirador N95
- Exclusivo SmartStrap® ajustable y colgable
- Cubierta exterior Dura-Mesh® patentada y revestimiento interior Softspun®
- Resistente a fluidos: 160 mm Hg¹
- Cumple con las pautas de los CDC para el control de la exposición a la TB
- Este producto no contiene componentes hechos de látex de caucho natural
- 100% Libre de PVC para una alternativa más ecológica

¹ASTM F 1862

APLICACIONES CUIDADO DE LA SALUD*


Cirugía, hospitales y centros de atención médica, enfermería/cuidado de hospicio, centros correccionales, policía, equipos de rescate y bomberos, EMS/EMT, refugios para personas sin hogar, centros de salud ocupacional, oficinas de atención médica escolar, odontología, ortodoncia y cirujanos orales.

**Siempre consulte las advertencias, limitaciones y restricciones antes de usar respiradores Moldex en cualquier entorno o aplicación.*

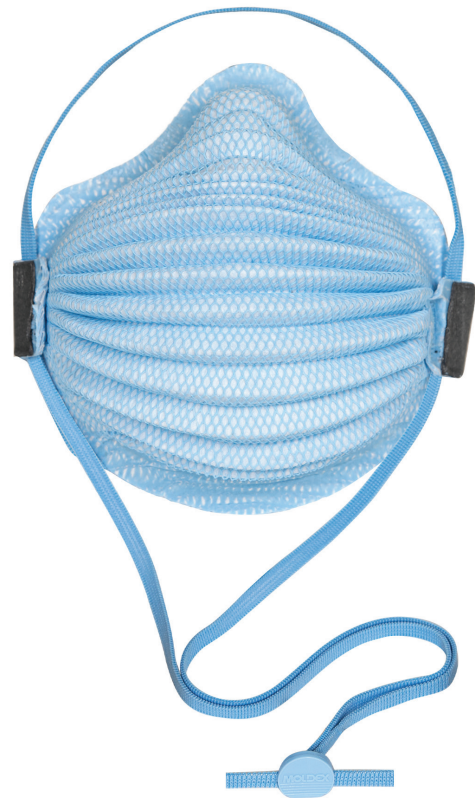

Sello Completo en Serie 4150

Cuatro Capas

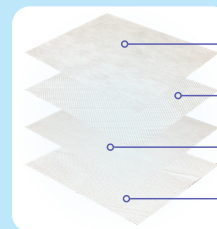

- Revestimiento Softspun® es cómodo en el rostro.
- Malla Dura-Mesh® Interior ayuda a prevenir el colapso por calor y humedad.
- Filtro está protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh.
- Malla Dura-Mesh® Exterior mantiene el respirador con un aspecto más limpio.

AIRWAVE CUIDADO DE LA SALUD

RESPIRADOR PARA PARTÍCULAS QUIRÚRGICO N95

PARTES #	TALLA	TIPO DE SELLO	COLOR CLIP DE AJUSTE	CANT. EMPAQUE	CANT. CASE
4150	M/G	Completo	Gris	10/Caja	10 Cajas
4151	P	Completo	Blanco	10/Caja	10 Cajas
4650	M/G	Nasal	Gris	10/Caja	10 Cajas
4651	P	Nasal	Blanco	10/Caja	10 Cajas

M/G = Mediano/Grande P = Pequeño

Antes del uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones para el usuario proporcionadas como parte del empaque del producto.

ADVERTENCIA AL USUARIO

- En las bandas para la cabeza de estos respiradores se utilizan bandas que no son de látex. Sin embargo, las personas muy sensibles al látex de caucho natural pueden tener una reacción alérgica.
- Este producto no elimina el riesgo de contraer ninguna enfermedad o infección. Cámbiese inmediatamente si el respirador entra en contacto con sangre o fluidos, incluidos los fluidos corporales. OSHA no ha establecido un nivel de exposición permisible para riesgos biológicos en el aire.
- Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado en el cuidado de la salud o situaciones relacionadas, donde puede existir la posibilidad de contacto con enfermedades o peligros biológicos. Si está considerando tales usos, primero llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex: +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500 ext. 512.

INSTRUCCIONES DE USUARIO ESPECIALES O CRÍTICAS

Este respirador ha sido aprobado como un respirador con pieza facial filtrante NIOSH N95, para uso en entornos de atención médica, como un respirador quirúrgico N95 que cumple con los estándares reconocidos de biocompatibilidad, inflamabilidad y resistencia a los fluidos.

GARANTÍA LIMITADA AVISO IMPORTANTE PARA EL COMPRADOR

Esta garantía limitada reemplaza las garantías de comerciabilidad, idoneidad para propósitos particulares y todas las demás garantías, expresas o implícitas. No hay otras garantías que se extiendan más allá de la descripción en el anverso del presente. Los productos vendidos cumplirán con los estándares físicos y las especificaciones de Moldex. Remedios exclusivos: los daños por el incumplimiento de esta garantía limitada se limitan al reemplazo de dicha cantidad de productos Moldex que se demuestre que están fabricados de manera defectuosa. Excepto por lo dispuesto anteriormente, Moldex no será responsable de ninguna pérdida, daño o responsabilidad, directa, indirecta, incidental, especial o consecuente, que surja de la venta, uso o mal uso, o la incapacidad de usar los productos por parte del usuario.

ASISTENCIA TÉCNICA MOLDEX

Moldex brinda toda la asistencia técnica requerida para establecer un programa de protección auditiva. Para más información llame al +1 (800) 421-0668 o al +1 (310) 837-6500 ext. 512 o correo electrónico: tech@moldex.com o visite www.moldex.com.

DISTRIBUIDO POR:

MOLDEX-METRIC, INC.

10111 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232

TEL: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500

FAX: +1 (310) 837-9563

E-mail: sales@moldex.com | www.moldex.com

U.S. & CANADA CUSTOMER SERVICE

TEL: +1 (800) 421-0668, Ext. 550

MOLDEX AMÉRICA LATINA

TEL: +52 (442) 234-1230
ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



Moldex-Metric, Inc.
Culver City, California, U.S.A.
+1 (800) 421-0668



ESTE RESPIRADOR ESTÁ APROBADO ÚNICAMENTE EN LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

TC-	PROTECCION ¹	RESPIRADOR				PRECAUCIONES & LIMITACIONES ²
		4150	4151	4650	4651	
84A-9392	N95	X	X			A B C I M N O S
PENDIENTE				X	X	A B C I M N O S

1. PROTECCIÓN

Filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtro n95%) efectivo contra aerosoles de partículas libres de aceite; se pueden aplicar restricciones de uso del tiempo

2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A- No apto para uso en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno.
- B- No para uso en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
- C- No exceder las concentraciones máximas de uso establecidas por las normas reglamentarias.
- J- Si no se usa y mantiene correctamente este producto, se pueden producir lesiones o la muerte.
- M- Todos los respiradores aprobados deben seleccionarse, ajustarse, usarse y mantenerse de acuerdo con MSHA, OSHA y otras reglamentaciones aplicables.
- N- Nunca sustituya, modifique, añada u omita piezas. Utilice únicamente repuestos exactos en las configuraciones especificadas por el fabricante.
- O- Consulte las instrucciones del usuario y/o los manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y el mantenimiento de estos respiradores.
- S- Se aplican instrucciones especiales o críticas para el usuario o limitaciones de uso específicas. Consulte las instrucciones del usuario antes de ponerse

DESCRIPCIÓN

- El respirador Moldex Surgical/N95 está diseñado para ayudar a brindar protección respiratoria al usuario. Este producto ha sido probado¹ y certificado por NIOSH como un respirador N95 y tiene un nivel de eficiencia de filtro del 95 % o más contra aerosoles de partículas libres de aceite. Es resistente a líquidos,² desechable y se puede usar en cirugía o en todo el hospital.
- Este producto no contiene componentes hechos de látex de caucho natural.

USO PREVISTO

Los diversos modelos de Moldex Surgical/N95 cumplen con las pautas de los CDC para el control de la exposición a la tuberculosis en los centros de atención médica. Estos dispositivos también están destinados a ser usados por el personal de atención médica durante los procedimientos quirúrgicos para proteger tanto al paciente como al personal de atención médica de la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

CONTRAINDICACIONES:

- No debe usarse con barba u otro vello facial que impida el contacto directo entre la cara y la superficie de sellado del respirador.
- Los anteojos no deben impedir el contacto directo entre la cara y la superficie de sellado del respirador.
- No debe usarse en niños

¹Probado de acuerdo con NIOSH 42 CFR 84

²Pasó ASTM F 1862 @ 160 mm Hg

RESTRICCIONES

- Este respirador no suministra oxígeno y no debe usarse en atmósferas que contengan menos del 19,5 % de oxígeno.
- No permanezca en el área contaminada si ocurre algún malestar físico, por ejemplo, dificultad para respirar, mareos o náuseas.
- Abandone el área contaminada y reemplace el respirador si está dañado, distorsionado, no se puede obtener un ajuste adecuado o se dificulta la respiración.
- Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente todo el respirador, incluido el medio filtrante y el área de unión de la correa/soldadura en busca de rasgaduras y daños. Las perforaciones de grapas o correas/sujeciones soldadas no afectan el rendimiento del respirador.
- No altere, modifique ni abuse de este respirador.
- Guarde los respiradores sin usar en una caja/bolsa en una área limpia, seca y no contaminada.
- Deseche el respirador de acuerdo con la política de su empleador y las reglamentaciones locales.
- Deseche a más tardar treinta días después del primer uso.
- Use el respirador antes de la fecha de caducidad impresa en la caja/bolsa.
- Si se usa para soldar, use protección adecuada para los ojos y la cara.



Made in USA
Hecho en USA
Fabriqué aux É.U.



Latex Free
Sin látex
Sans latex



PVC FREE
Libre de PVC
PVC Gratuit



Printed on Recycled Paper
Imprimé sur papier recyclé
Impresso en papel reciclado
Impresso en papel reciclado